



## Plum pH Neutral - Информация о продукте

### Описание


pH Neutral обеспечивает 2-х минутное промывание глаз или кожи в случае инцидентов с вовлечением кислот или щелочей. Флакон снабжен эргономичной насадкой, которая обеспечивает правильное и щадящее промывание. Слегка нажимайте на флакон во время промывания. Флаконы DUO снабжены специальной насадкой, позволяющей промывать оба глаза одновременно. Наши флаконы с жидкостью для промывания глаз являются изделиями медицинского назначения согласно Директиве ЕС 92/42/ЕЕС. Паспорт безопасности доступен.



### Область применения

При несчастных случаях, связанных с кислотами и щелочами, химикалии должны быть как можно скорее нейтрализованы до уровня pH 7.4, который соответствует нормальному уровню жидкой среды глаза. Использование обычной воды или 0.9% раствора хлористого натрия дает только разбавляющий и ополаскивающий эффект (смотрите рисунок 1). Дополнительная документация об эффективности и действию pH Neutral доступна по запросу. После использования pH Neutral мы рекомендуем продолжить промывание Plum Eye Wash 0.9% раствором хлористого натрия до обращения к врачу. Внимание! Следует обратиться к врачу при любом повреждении глаз!

Рисунок 1: Нейтрализующий эффект pH Neutral и 0.9% раствора хлористого натрия\*

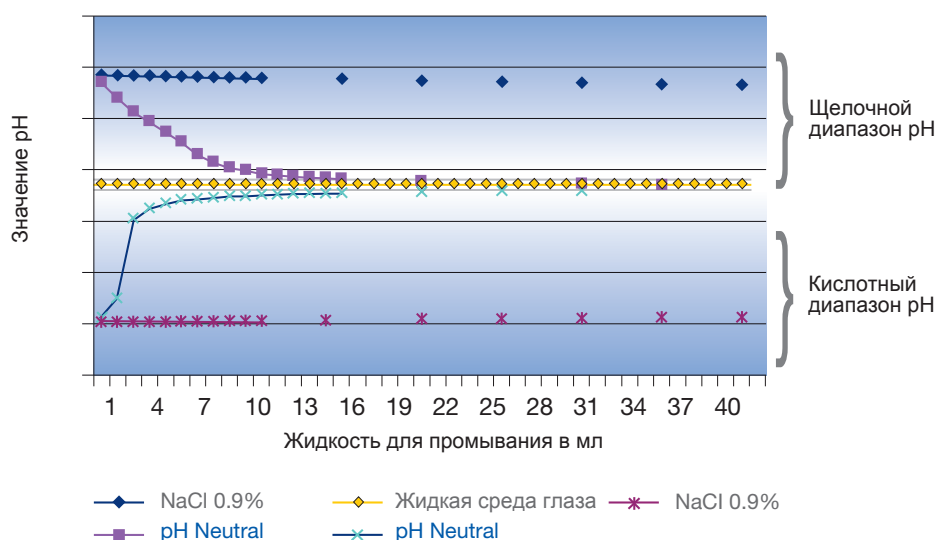

\* Титриметрический анализ произведен (in vitro) в лаборатории Plum A/S. В ходе теста в жидкость pH Neutral и 0.9% раствор хлористого натрия был постепенно добавлен раствор, содержащий одну каплю серной кислоты +40 мл воды, а также раствор, содержащий одну каплю едкого калия + 40 мл воды. Затем были произведены замеры значений pH и количества жидкости для промывания глаз.

# Plum pH Neutral - Информация о продукции



## Преимущества

- Высокая функциональная надежность - флаконы изготовлены в соответствии с DIN EN 15154-4
- Решения, подходящие для различных ситуаций - флаконы разных размеров для мобильного использования и станции для монтирования на стене вблизи рабочего места
- Широкая сфера применения (производство, лаборатории, наборы первой помощи, для мобильного использования в машинах, карманах и прочем.
- Прост в обращении: пострадавший может воспользоваться изделием без посторонней помощи
- Большой срок годности - 3 года для запечатанных флаконов
- Не требует обслуживания или замены жидкости (в отличие от обычной воды)

## Как воспользоваться флаконом:



Извлеките флакон из контейнера



Поверните колпачок для нарушения пломбы



Запрокиньте голову назад и начните промывание



Или наклоните голову вперед, чтобы избежать намочания одежды

## Руководство пользователя

Продукт предназначен исключительно для одноразового использования. Не использовать после даты, указанной на флаконе. Пломбировка флакона должна быть неповреждена для обеспечения безопасного промывания. После вскрытия пломбировки возникает риск инфекции при повторном использовании!

## Размеры флаконов

Содержание	200 мл	500 мл DUO	1000 мл аварийный душ
Артикул	4752	4801	4746
Время промывания	около 2 мин.	около 2 мин. для каждого глаза	около 2 мин.
Размеры	В: 165 X ø 55 мм	В: 220 X ø 75 мм	В: 270 X ø 85 мм